

NEW



element DCX

Veterinary Chemistry Analyzer

Leverage sophisticated in-house chemistry with the analyzer built for any practice that needs speed, ease of use and accuracy.

Our trusted dry slide and Ion Selective Electrode (ISE) technologies bring the quality of reference lab results into your clinic with unmatched savings so you can reinvest in your practice and patients. Worklisting, preloaded tips, and convenient eWrap™ panels allow you to get back to patient care sooner. Bring convenience, speed and confidence to your clinic today.

Gold Standard Dry Slide Technology

Reference Lab Quality (ISE) Electrolyte Results

Intuitive 7" Colour LCD Touchscreen

Automated Dilution



Easy Operation Simplified 3-step Process



1 Set Slides



2 Set Samples



3 Press the Start key

Convenient



Preload tips, mixing cups and more

Features:

High Efficiency

- Preload 12 pipette tips at once
- Fully automated dilution
- Worklisting available to simplify data entry

Trusted dry slide technology

- Broad and customizable test menu
- Unsurpassed accuracy and reproducibility
- Pre-packaged panels for convenience

Ease of Use

- Insert eWrap panel into sample rack, pull tab and go!

ISE electrolyte technology

- Reference lab technology on an in-house analyzer
- Auto-cap feature maintains continuity of RE Solution

Dimensions (WxDxH)

- 18.5" x 14.2" x 14.6"
(470 mm x 360 mm x 370 mm)

Small Sample Size

Accommodates juvenile and exotic patients




10 µL per test

DCX

INDIVIDUAL PARAMETERS*	Pre-Surgical eWrap	Comprehensive eWrap	Comp+ eWrap	PLUS	Liver	Kidney	Equine
ALT	•	•	•		•		
ALP	•	•	•		•		
GGT		•	•		•		•
TBIL		•	•		•		•
AST		•	•	•			•
BUN	•	•	•			•	•
CREA	•	•	•			•	•
PHOS		•	•			•	•
GLU	•	•	•		•		•
TP	•	•	•			•	•
ALB		•	•		•		•
Ca		•	•			•	•
CHOL		•	•				
Mg			•	•			
AMY			•	•			
LDH							•
LIP			•	•			
TCO ₂							
TRIG			•	•			
CK							•
URIC							
NH ₃							
Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ (1 Slide)			•	•			
CALCULATED PARAMETERS							
GLOB		•	•			•	•
ALB : GLOB		•	•			•	•
BUN : CREA	•	•	•			•	•
Na : K			•	•			


Intuitive multi-functional touchscreen interface:

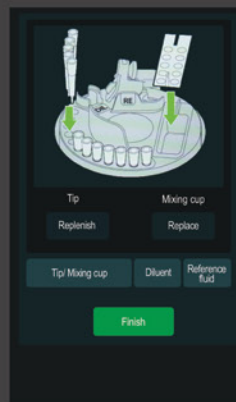

Setup



Results

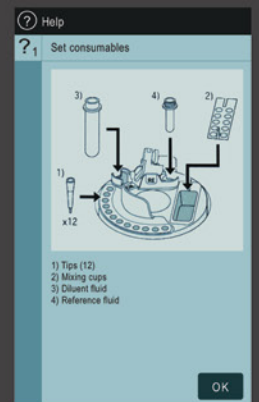

Help

Comp+™ eWrap™ Panel

...the most convenient and encompassing in-clinic panel available.

Just load and go!

